



Komposit-Instrumente

Pflegehinweise

Sehr geehrter Kunde!


Vielen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges SCHWERT Produkt entschieden haben.

Bei allen Reinigungsvorgängen ist stets unsere Anleitung zur Wiederaufbereitung von resterilisierbaren Handinstrumenten und deren Zubehör nach DIN EN ISO 17664, in der jeweils gültigen Fassung, zu beachten. Siehe Dokument „0703091007_WIEDERAUFBEREITUNG_AS_BA_d“, downloadbar auf unserer Website www.schwert.com.

Nachfolgend möchten wir Ihnen ein paar Tipps zur Pflege geben:

- Die Instrumente dürfen nicht in Kontakt mit Amalgam kommen (z. B. beim Legen von Füllungen bzw. durch Rückstände an den Handschuhen).
- Entfernen Sie Materialrückstände z. B. durch Abwischen mit einem Alkoholtuch noch am Stuhl, um ein Auftrocknen zu verhindern. Dadurch unterbinden Sie späteren manuellen Kraftaufwand, der unter Umständen zu einem Verkratzen der Oberfläche führen kann.
- Trocknen Sie die Instrumente gut vor der Sterilisation um die Bildung von Wasserflecken zu vermeiden. Verwenden Sie hierzu bitte ein sauberes und weiches Baumwoll- oder ein Mikrofaser Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Edelstahl-, Messingbürsten oder Scheuermittel, verwenden Sie bei hartnäckigen Verunreinigungen nur eine harte Zahnbürste. Grobe mechanische Einwirkungen sind unbedingt zu vermeiden (abrasive Reinigungshilfsmittel wie z. B. Reinigungspads, durch Fremdpartikel verschmutzte Reinigungstextilien, etc.).
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmedien (extrem sauer / basisch, Scheuerwirkung).
- Bei Aufbereitung der Instrumente im Ultraschallbad bitte die Beschallungszeiten genau einhalten.
- Spülen Sie die Instrumente nach der Reinigung mit klarem Wasser, besser noch mit demineralisiertem Wasser.
- Bei Wannendesinfektion achten Sie bitte darauf, dass die Oberflächen nicht durch andere Instrumente beschädigt werden. Kontakt der Teile untereinander während der Reinigung / Sterilisation ist zu vermeiden (Gefahr von Kontaktkorrosion).
- Bei Thermodesinfektion empfehlen wir die Aufbereitung dieser Instrumente in einem Tray (siehe hierzu unsere Sets 4085-00Ti oder Tray 2599-05), um Beschädigungen auf der Oberfläche zu vermeiden.
- Die Instrumentensets lassen sich problemlos in einer Sterilfolie einschweißen und können dort bis zu 6 Wochen gelagert werden (nach DIN 58953 Teil 7).

Wir möchten, dass Sie lange Freude an unseren Instrumenten haben und danken für Ihre Aufmerksamkeit.

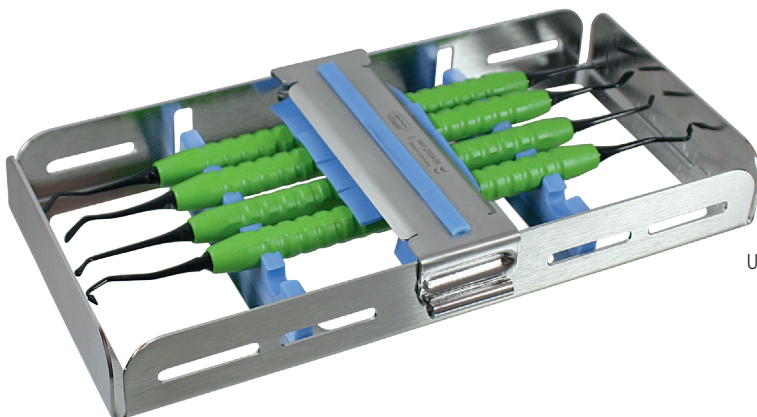

ULTRA

4085-00Ti

ULTRA Composite Set, beinhaltet: 4085-01Ti, 4085-02Ti, 4085-03Ti, 4085-04Ti, Waschtray 2599-05





Composite Instruments

Maintenance Instructions

Dear customer,


Thank you for choosing these high quality SCHWERT instrument.

For all cleaning processes, please consider our application guidance of autoclavable instruments and accessories according to DIN EN ISO 17664, in the currently valid version. See document "0703091007_REPROCESSING_AS_BA_e", downloadable from our website www.schwert.com.

To maximize the life of your Composite Instruments, please follow the instructions below:

- Any contact of the instruments with amalgam has to be avoided (e.g. when inlays are placed or due to residues on gloves).
- Remove residues of material on the instrument immediately – still in the dental chair, e. g. by wiping with a cloth soaked in alcohol, in order to avoid drying-up. Thus, you avoid subsequent manual effort which might possibly lead to scratches on the instrument surface.
- Prior to sterilization, dry the instruments carefully with a clean and soft cotton or microfiber cloth in order to avoid water spots.
- Do not use stainless steel brushes, brass brushes or abrasives for cleaning. To remove tenacious dirt, only use a firm toothbrush. Absolutely avoid any rough mechanical stress (abrasive detergents, e.g. detergent pads, cleaning cloths soiled by foreign particles, etc.).
- Avoid any aggressive cleaning agents (extremely acidic / basic, abrasive effect).
- If an ultrasonic cleaner is used, do not exceed the manufacturer's recommended periods.
- After cleaning, rinse the instruments with clear or even better with demineralized water.
- If the instruments are cleaned in a disinfection bath, take care that the instruments' surfaces are not damaged by other instruments. A contact of the instrument parts during the cleaning process / during the sterilization has to be avoided (danger of contact corrosion).
- In thermal disinfection, we recommend to prepare these instruments in a washtray (see our sets 4085-00Ti or tray 2599-05) in order to avoid damages on the surface.
- The instrument set (4085-00Ti) may be sealed in sterile film in which they are able to be stored up to 6 weeks (acc. to DIN 58953 Part 7).

Thank you very much for your attention and following these instructions.

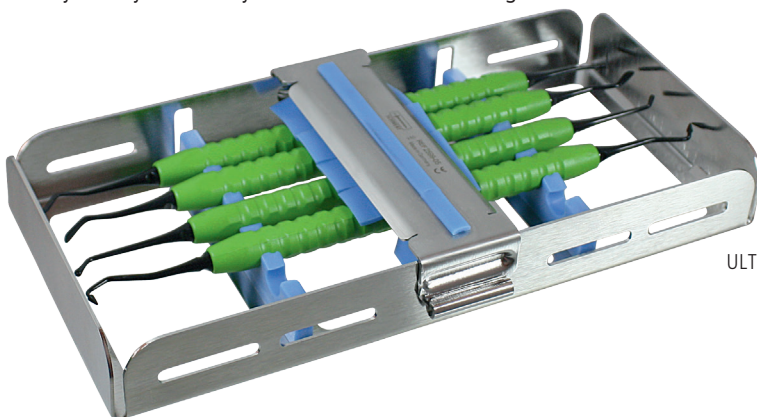

ULTRA

4085-00Ti

ULTRA Composite set, consisting of: 4085-01Ti, 4085-02Ti, 4085-03Ti, 4085-04Ti, washtray 2599-05

